

CHIRURGIA



**Panther<sup>®</sup>**

Suturatrici



## **Gamma dei prodotti**

Suturatrice motorizzata a batteria - SMART.....	4
Suturatrice endoscopica manuale - CEAC.....	8
Caricatori Articolabili con Tecnologia P2G .....	10
Suturatrice lineare con lama con TECNOLOGIA EXTRA GRIP .....	12
Suturatrice lineare retta CON LAMA.....	14
Suturatrice lineare retta SENZA LAMA .....	16
Suturatrici circolari curve standard.....	18
Suturatrici circolari curve a stelo lungo .....	20
Suturatrici circolari per anopessi ad alto volume .....	22
Suturatrici circolari per anopessi standard.....	24
Clips Emostatiche PANTHERLOK® .....	26
Applicatori PANTHERLOK®.....	27

## Suturatrice motorizzata a batteria - SMART


Suturatrice intelligente con identificazione della ricarica, riconoscimento del tessuto e controllo dell'azionamento

**ASSISTITA  
ELETTRONICAMENTE**  
Ricariche con **"CHIP"**  
incorporato per la scelta  
più precisa del chirurgo



Innovativo Sistema  
di articolazione di 45° gradi  
**"Non-Stop"**

Manipolo universale  
più ergonomico e più facile  
da ruotare di 360° gradi

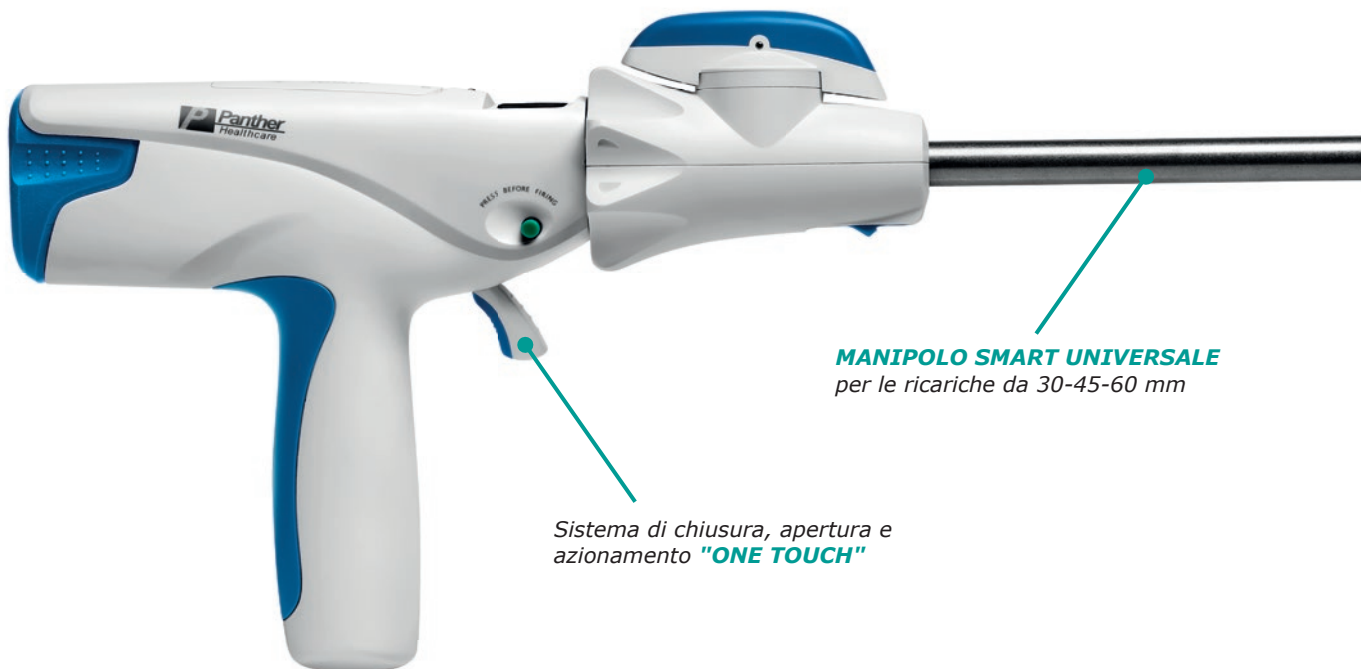

**MANIPOLO SMART UNIVERSALE**  
per le ricariche da 30-45-60 mm

Sistema di chiusura, apertura e  
azionamento **"ONE TOUCH"**



### TECNOLOGIA P2G

- Tecnologia "**Double Grip**"
- Diffusione laterale dei fluidi
- Migliore compressione dei tessuti.



La **Tecnologia P2G** garantisce una sutura migliore con più sicurezza e migliore emostasi.

## NUOVA GENERAZIONE DI SUTURATRICI ENDOSCOPICHE

SUTURATRICI SMART, RICARICABILI FINO A 15 VOLTE PER INTERVENTO		
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
PEAS	Manipolo <b>MOTORIZZATO</b> per suturatrice endoscopica con lama con articolazione "Non-Stop" (Stelo corto 6 cm)	-
PEAM	Manipolo <b>MOTORIZZATO</b> per suturatrice endoscopica con lama con articolazione "Non-Stop" (Stelo standard 16 cm)	-
PEAL	Manipolo <b>MOTORIZZATO</b> per suturatrice endoscopica con lama con articolazione "Non-Stop" (Stelo lungo 26 cm)	-

RICARICA ENDOSCOPICA ARTICOLABILE CON TECNOLOGIA P2G		
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
CADF-30T	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 30 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○
CADF-30N	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 30 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●
CADF-45T	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○
CADF-45N	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●
CADF-45S	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.	ORO ●
CADF-45D	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.	VERDE ●
CADF-45R	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.	NERO ●
CADF-60T	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○
CADF-60N	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●
CADF-60S	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.	ORO ●
CADF-60D	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.	VERDE ●
CADF-60R	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.	NERO ●



### TECNOLOGIA P2G

Tecnologia di bloccaggio progressivo.

Incudine e cartuccia con lati atraumatici:

- Bloccaggio progressivo
- Danni minori sui tessuti.



#### Sezione dell'incudine

La struttura migliorata dell'incudine garantisce l'assenza di deformazioni durante il riscaldamento sui tessuti spessi e garantisce i migliori risultati di sutura.





#### Punta arrotondata dell'incudine P2G

Con la nuova punta arrotondata l'incudine P2G consente una più semplice dissezione smussa su diversi tessuti.

### TECNOLOGIA P2G

- Tecnologia a doppia presa
- Diffusione laterale dei fluidi
- Migliore compressione dei tessuti

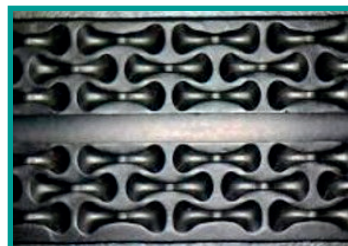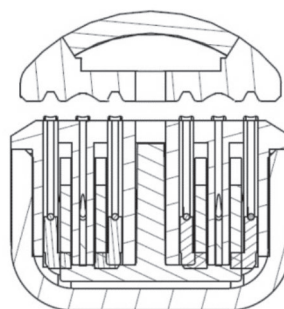


#### Scanalatura per punti metallici a forma di goccia


La scanalatura per punti metallici allargata è maggiormente conduttiva per una chiusura dei punti a forma di B ideale per i tessuti spessi.

## Suturatrice endoscopica manuale - CEAC

Manipolo ergonomico compatibile con tutti i caricatori con Tecnologia P2G

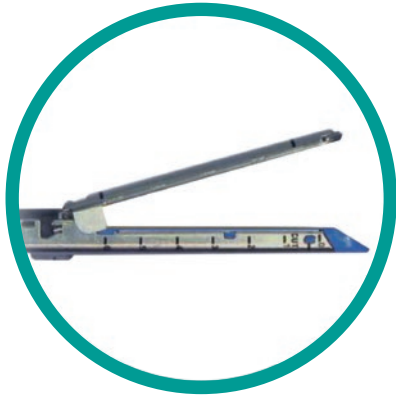

L'ampia apertura delle morse consente un facile posizionamento sui tessuti. **Due triple file sfalsate** di punti in titanio forniscono un'emostasi superiore.

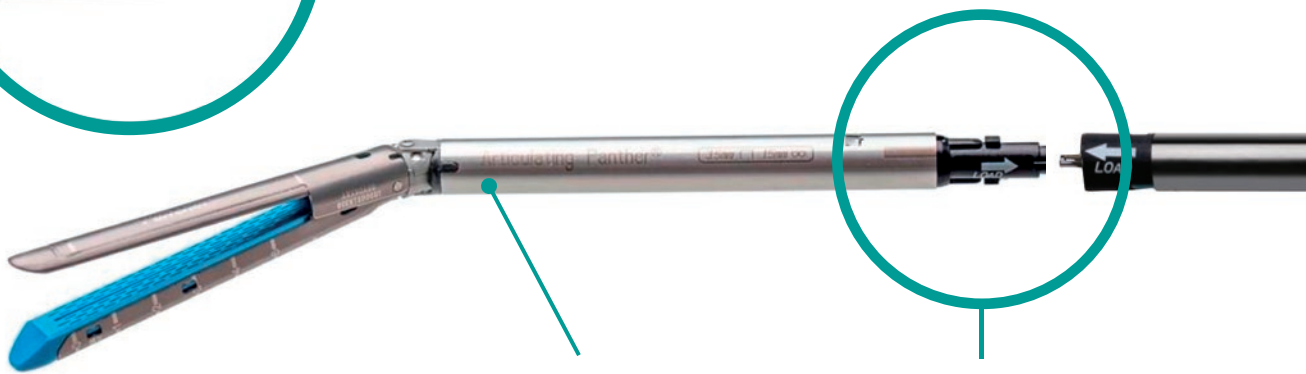

Caricatore

Indicatore di allineamento del caricatore per un preciso caricamento sul manipolo.




Articolazione continua **NON-STOP** a 45°





## Caricatori Articolabili con Tecnologia P2G

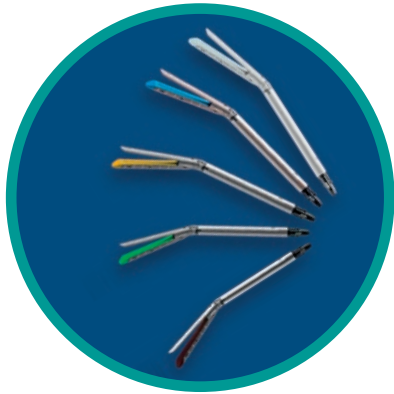

La gamma più completa di caricatori per coprire tutte le esigenze chirurgiche. Cinque differenti altezze di punto aperto: **2.5 mm, 3.5 mm, 4.2 mm, 4.8 mm, 5.0 mm**, destinate a diversi spessori di tessuto.

CODICE	H. PUNTI APERTI (mm)	H. PUNTI CHIUSI (mm)	COLORE
T	2.5	1.0	bianco ○
N	3.5	1.5	blu ●
S	4.2	1.8	oro ●
D	4.8	2.0	verde ●
R	5.0	2.35	nero ●

Codifica colore universale per determinare l'altezza dei punti: BIANCO per tessuti vascolari, BLU per standard, ORO per mediospessi, VERDE per spessi, NERO per ultraspessi.

Caricatori BIANCHI e BLU e ORO compatibili con trocar con diametro da 12 mm, caricatori VERDI e NERI con trocar diametro 15 mm.

### MANIPOLO PER SUTURATRICE MONOPAZIENTE ENDOSCOPICA RICARICABILE LINEARE CON LAMA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONF.
CEAC30	Manipolo ricaricabile, lungh. stelo 16 cm (standard)	-	1 pz.
CEAC45	Manipolo ricaricabile, lungh. stelo 6 cm (corto)	-	1 pz.
CEAC60	Manipolo ricaricabile, lungh. stelo 26 cm (lungo)	-	1 pz.

### RICARICA ENDOSCOPICA ARTICOLABILE CON TECNOLOGIA P2G

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
CADF-30T	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 30 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○
CADF-30N	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 30 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●
CADF-45T	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○
CADF-45N	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●
CADF-45S	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.	ORO ●
CADF-45D	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.	VERDE ●
CADF-45R	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.	NERO ●
CADF-60T	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○
CADF-60N	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●
CADF-60S	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.	ORO ●
CADF-60D	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.	VERDE ●
CADF-60R	Ricarica PANTHER® monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.	NERO ●

### RICARICA ENDOSCOPICA ARTICOLABILE A PUNTA CURVA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONF.
CADC-30T	Linea di sutura 30 mm, altezza punti 2.5 mm, articolabile a punta curva	BIANCO ○	1 pz.
CADC-45T	Linea di sutura 45 mm, altezza punti 2.5 mm, articolabile a punta curva	BIANCO ○	1 pz.




## Suturatrice lineare con lama con TECNOLOGIA EXTRA GRIP

Adatte per la Chirurgia Open, garantiscono un'elevata precisione di taglio e sutura con la massima semplicità di utilizzo

Caricatore con **lama integrata** per garantire un'elevata precisione di taglio e utilizzo

Suturatrice completa di caricatore e ricaricabile fino a **7 volte**

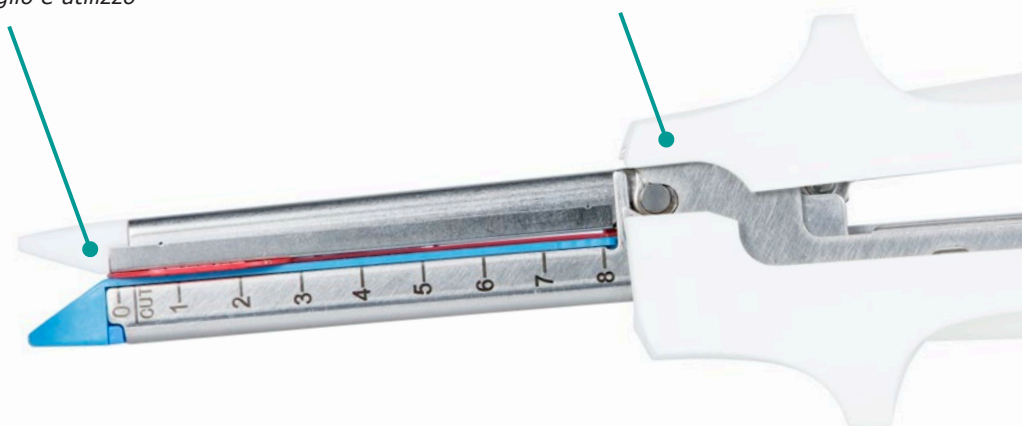


- Due doppie file di sutura sfalsate con punti in titanio.
- Emostasi eccellente: il taglio segue progressivamente la posa dei punti di sutura.
- Azionamento di taglio/sutura eseguibile indifferentemente da entrambi i lati: la presenza della leva di avanzamento da tutti e due i lati della suturatrice consente un facile utilizzo a destrorsi e mancini.
- Estremamente sicura: una volta utilizzato il caricatore, la lama si blocca per evitare tagli accidentali.

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONF.
SSAB-60D	Suturatrice monopaziente PANTHER® lineare con lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.8 mm	-	1 pz.
SSAB-60N	Suturatrice monopaziente PANTHER® lineare con lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 3.8 mm	-	1 pz.
SSAB-80D	Suturatrice monopaziente PANTHER® lineare con lama, linea di sutura 80 mm, altezza punti 4.8 mm	-	1 pz.
SSAB-80N	Suturatrice monopaziente PANTHER® lineare con lama, linea di sutura 80 mm, altezza punti 3.8 mm	-	1 pz.
SSAB-100N	Suturatrice monopaziente PANTHER® lineare con lama, linea di sutura 100 mm, altezza punti 3.8 mm	-	1 pz.
SSAB-100D	Suturatrice monopaziente PANTHER® lineare con lama, linea di sutura 100 mm, altezza punti 4.8 mm	-	1 pz.
SADB-60D	Caricatore monouso per suturatrice lineare PANTHER® con lama, linea di sutura di 60 mm, altezza punti 4.8 mm	VERDE	1 pz.
SADB-60N	Caricatore monouso per suturatrice lineare PANTHER® con lama, linea di sutura di 60 mm, altezza punti 3.8 mm	BLU	1 pz.
SADB-80D	Caricatore monouso per suturatrice lineare PANTHER® con lama, linea di sutura di 80 mm, altezza punti 4.8 mm	VERDE	1 pz.
SADB-80N	Caricatore monouso per suturatrice lineare PANTHER® con lama, linea di sutura di 80 mm, altezza punti 4.8 mm	BLU	1 pz.
SADB-100D	Caricatore monouso per suturatrice lineare PANTHER® con lama, linea di sutura di 100 mm, altezza punti 4.8 mm	VERDE	1 pz.
SADB-100N	Caricatore monouso per suturatrice lineare PANTHER® con lama, linea di sutura di 100 mm, altezza punti 3.8 mm	BLU	1 pz.

### TECNOLOGIA ATRAUMATICA EXTRA GRIP (EG)

- Meno slittamento ad ogni sparo
- Tessuto trattenuto efficacemente nelle morse.
- Forza di azionamento ridotta
- Linea di sutura uniforme e coerente
- Risparmio dei costi.

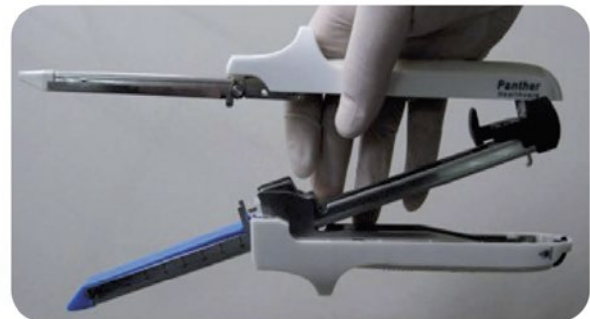

Possibilità di utilizzo con classica presa a due mani o presa a forbice


CODICE	H. PUNTI APERTI (mm)	H. PUNTI CHIUSI (mm)	COLORE
N	3.8	1.5	BLU ●
D	4.8	2.0	VERDE ●

Codifica colore universale per determinare l'altezza dei punti: BLU per standard, VERDE per spessi.


## Suturatrice lineare retta CON LAMA

Dedicata per la chirurgia del retto basso (LAR).


La suturatrice monopaziente ricaricabile combina una linea di sutura da 40 mm ed il taglio progressivo

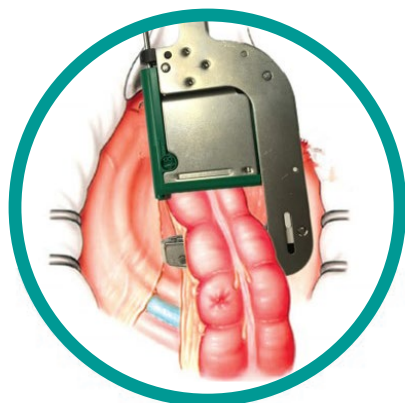

Linea dritta di taglio e linea di sutura.  
Una buona linea di sutura assicura  
una perfetta irrorazione sanguigna.

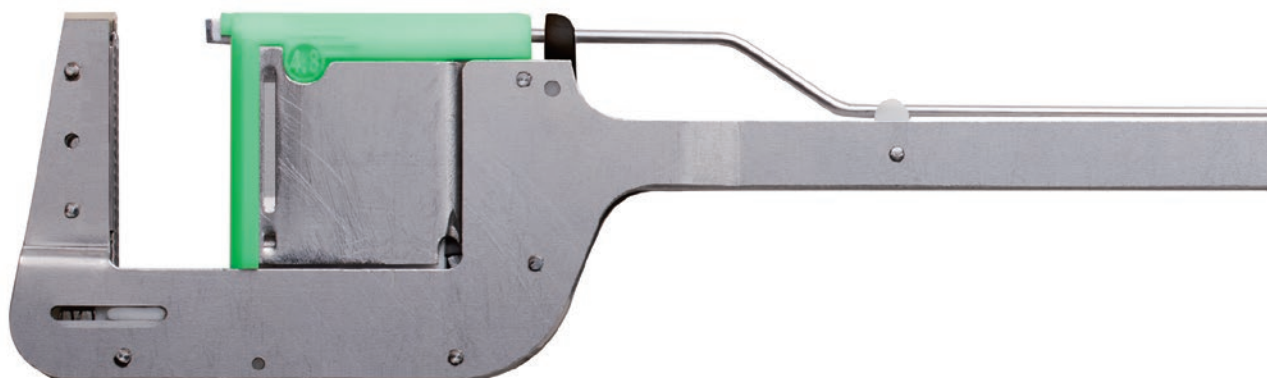

Il corpo cartuccia-incudine più corto e l'apertura delle  
morse più ampia sul mercato. Facilita l'accesso della  
suturatrice ed il suo perfetto posizionamento sui tessuti.

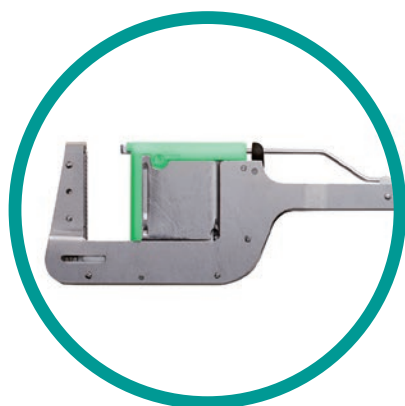

Design unico: taglio e sutura insieme.  
La direzione del taglio è perpendicolare rispetto alla  
sutura. La sutura precede il taglio, garantendo un  
taglio preciso anche su tessuti più spessi.

Lo stelo più lungo pari a 265 mm consente di raggiungere anche la pelvi più profonda, eseguendo agevolmente la chirurgia del retto basso.


*Grazie al design ergonomico, occorre minor forza sull'impugnatura*



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA LINEA SUTURA	LUNGHEZZA LINEA TAGLIO	PUNTO APERTO	PUNTO CHIUSO
CAAB-40	Suturatrice Lineare Retta PANTHER® con lama	43 mm	40 mm	4.8 mm	2.0 mm
CAZB-40D	Caricatore per Suturatrice PANTHER® CAAB	43 mm	40 mm	4.8 mm	2.0 mm

## Suturatrice lineare retta SENZA LAMA

Ideali per interventi in chirurgia Open, con un'ampia gamma di dimensioni, integrando l'innovazione tecnologica dell'indicatore colorato posto sul retro

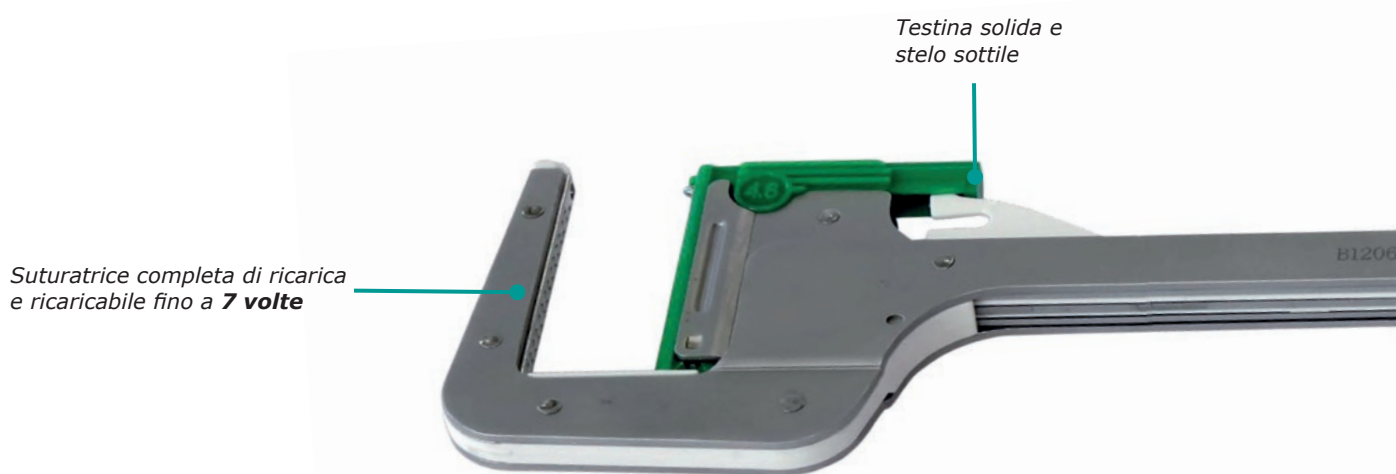

- Due file di sutura sfalsate con punti in titanio.
- Guida da entrambi i lati della testina: elevata precisione di taglio.
- Sistema di bloccaggio del tessuto automatico o manuale: il pin per bloccare il tessuto si aziona manualmente mediante la levetta di azionamento prima di chiudere la suturatrice oppure automaticamente al primo step di chiusura.
- Meccanismo di sicurezza: impedisce la chiusura della suturatrice in caso di errato posizionamento del caricatore o di caricatore già utilizzato.
- Indicatore colorato posto sul retro che consente al chirurgo di conoscere lo stato di avanzamento di chiusura, supportandolo in caso di scarsa visibilità intraoperatoria.

H. PUNTI APERTI (mm)	H. PUNTI CHIUSI (mm)	COLORE
3.5	1.5	blu ●
4.8	2.0	verde ●

Codifica colore universale per determinare l'altezza dei punti: BLU per standard, VERDE per spessi.

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
<b>FLSLF30-3.5</b>	Suturatrice PANTHER® monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 30 mm, altezza punti 3.5 mm	1 pz.
<b>FLSLF30-4.8</b>	Suturatrice PANTHER® monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 30 mm, altezza punti 4.8 mm	1 pz.
<b>FLSLF45-3.5</b>	Suturatrice PANTHER® monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 45 mm, altezza punti 3.5 mm	1 pz.
<b>FLSLF45-4.8</b>	Suturatrice PANTHER® monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 45 mm, altezza punti 4.8 mm	1 pz.
<b>FLSLF60-3.5</b>	Suturatrice PANTHER® monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 3.5 mm	1 pz.
<b>FLSLF60-4.8</b>	Suturatrice PANTHER® monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.8 mm	1 pz.
<b>FLSLF90-3.5</b>	Suturatrice PANTHER® monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 90 mm, altezza punti 3.5 mm	1 pz.
<b>FLSLF90-4.8</b>	Suturatrice PANTHER® monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 90 mm, altezza punti 4.8 mm	1 pz.



1. Bianco APERTO
2. Giallo CHIUSURA PARZIALE
3. Verde CHIUSURA TOTALE
4. Rosso SUTURA EFFETTUATA



Chiusura progressiva della Suturatrice.  
L'indicatore colorato posto sul retro cambia durante le varie fasi di chiusura, supportando il chirurgo.

Levetta azionamento  
manuale del Pin



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONF.
<b>FLSLH3.5A30</b>	Caricatore PANTHER® monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 30 mm, altezza punti 3.5 mm	blu ●	1 pz.
<b>FLSLH4.8A30</b>	Caricatore PANTHER® monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 30 mm, altezza punti 4.8 mm	verde ●	1 pz.
<b>FLSLH3.5B45</b>	Caricatore PANTHER® monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 45 mm, altezza punti 3.5 mm	blu ●	1 pz.
<b>FLSLH4.8B45</b>	Caricatore PANTHER® monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 45 mm, altezza punti 4.8 mm	verde ●	1 pz.
<b>FLSLH3.5C60</b>	Caricatore PANTHER® monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 3.5 mm	blu ●	1 pz.
<b>FLSLH4.8C60</b>	Caricatore PANTHER® monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.8 mm	verde ●	1 pz.
<b>FLSLH3.5E90</b>	Caricatore PANTHER® monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 90 mm, altezza punti 3.5 mm	blu ●	1 pz.
<b>FLSLH4.8E90</b>	Caricatore PANTHER® monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 90 mm, altezza punti 4.8 mm	verde ●	1 pz.

## Suturatrici circolari curve standard

Nate per la realizzazione di anastomosi ad elevata precisione, implementano la più moderna tecnologia della testina reclinabile



**Testina reclinabile a 90°** per una più agevole estrazione dal lume intraoperatorio

- Testina reclinabile. Una volta eseguita la sutura, in fase di riapertura la testina si inclina automaticamente, agevolando l'estrazione della suturatrice.
- Emostasi perfetta garantita dall'elevato numero di punti in titanio (da 18 a 32, su due linee concentriche sfalsate, a seconda del diametro della suturatrice).
- Feedback tattile ed uditivo: per assicurare all'operatore l'avenuto taglio, durante l'azionamento la lama circolare interna taglia un'apposita guarnizione di plastica posizionata all'interno della testina.

### CON TESTINA RECLINABILE


CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
<b>FCSME21</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® con testina ribaltabile, diam. 21 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard	1 pz.
<b>FCSME24</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® con testina ribaltabile, diam. 24 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard	1 pz.
<b>FCSME26</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® con testina ribaltabile, diam. 26 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard	1 pz.
<b>FCSME29</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® con testina ribaltabile, diam. 29 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard	1 pz.
<b>FCSME32</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® con testina ribaltabile, diam. 32 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard	1 pz.

### SENZA TESTINA RECLINABILE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
<b>FCSLWBE21</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® senza testina ribaltabile, diam. 21 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz.
<b>FCSLWBE24</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® senza testina ribaltabile, diam. 24 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz.
<b>FCSLWBE26</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® senza testina ribaltabile, diam. 26 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz.
<b>FCSLWBE29</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® senza testina ribaltabile, diam. 29 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz.
<b>FCSLWBE32</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® senza testina ribaltabile, diam. 32 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz.
<b>FCSLWBE34</b>	Suturatrice Circolare PANTHER® senza testina ribaltabile, diam. 34 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz.



Doppio meccanismo di sicurezza (esterno ed interno) per prevenire azionamenti accidentali. Per ottenere una perfetta chiusura dei punti è necessario posizionare l'indicatore rosso al centro della banda verde.

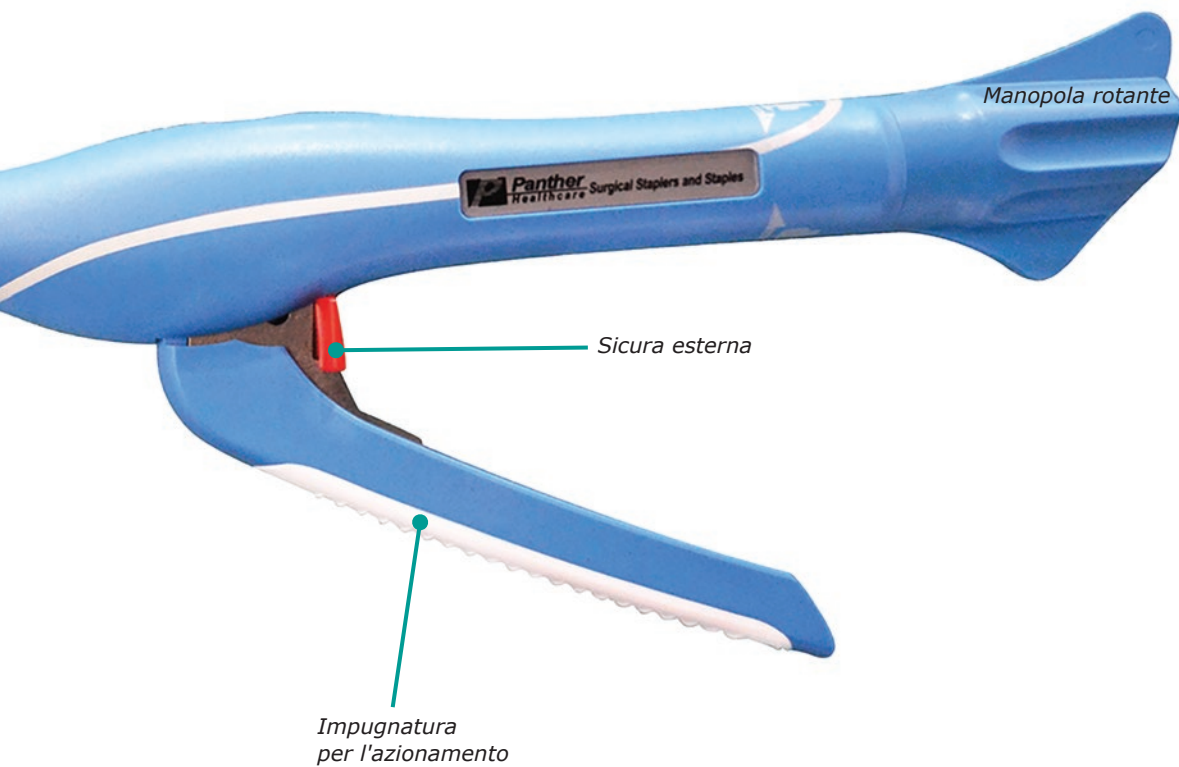

DIAMETRO	H. PUNTI APERTI (mm)	H. PUNTI CHIUSI (mm)
24	4.5	1.8
26 - 29	4.8	2.0
32 - 34*	5.0	2.2

\* La suturatrice da 34 mm è disponibile solamente nella versione senza testina reclinabile.

## Suturatrici circolari curve a stelo lungo

Un ampio range di suturatrici circolari avanzate per ogni esigenza chirurgica.

**Design ermetico** pensato per la chirurgia laparoscopica, per prevenire perdite di pneumoperitoneo



### TESTINA RECLINABILE A 90°

Per una più facile e sicura rimozione dopo l'anastomosi, riducendo al massimo il trauma tissutale.



### RONDELLA DI TAGLIO MIGLIORATA

Fornisce al chirurgo un chiaro feedback uditivo dopo l'azionamento.



### CARICATORE ED INCUDINE AUTOBLOCCANTI


Previene lo scivolamento del tessuto ed elimina il problema quando l'incudine ritorna dopo l'azionamento della suturatrice.

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
FCSLWAF25	Suturatrice Circolare PANTHER® con testina ribaltabile, diam. 25 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo	1 pz.
FCSLWAF29	Suturatrice Circolare PANTHER® con testina ribaltabile, diam. 29 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo	1 pz.
FCSLWAF32	Suturatrice Circolare PANTHER® con testina ribaltabile, diam. 32 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo	1 pz.



#### **DOPPIA VELOCITÀ DI CHIUSURA**

Durante la fase finale di chiusura dello strumento, la chiusura ottenuta con ogni giro dell'aletta a farfalla è più ravvicinata rispetto a quella iniziale. Questo fornisce un miglior controllo sull'azione di chiusura, evitando ogni possibile danno al tessuto che viene compresso in modo più sicuro.

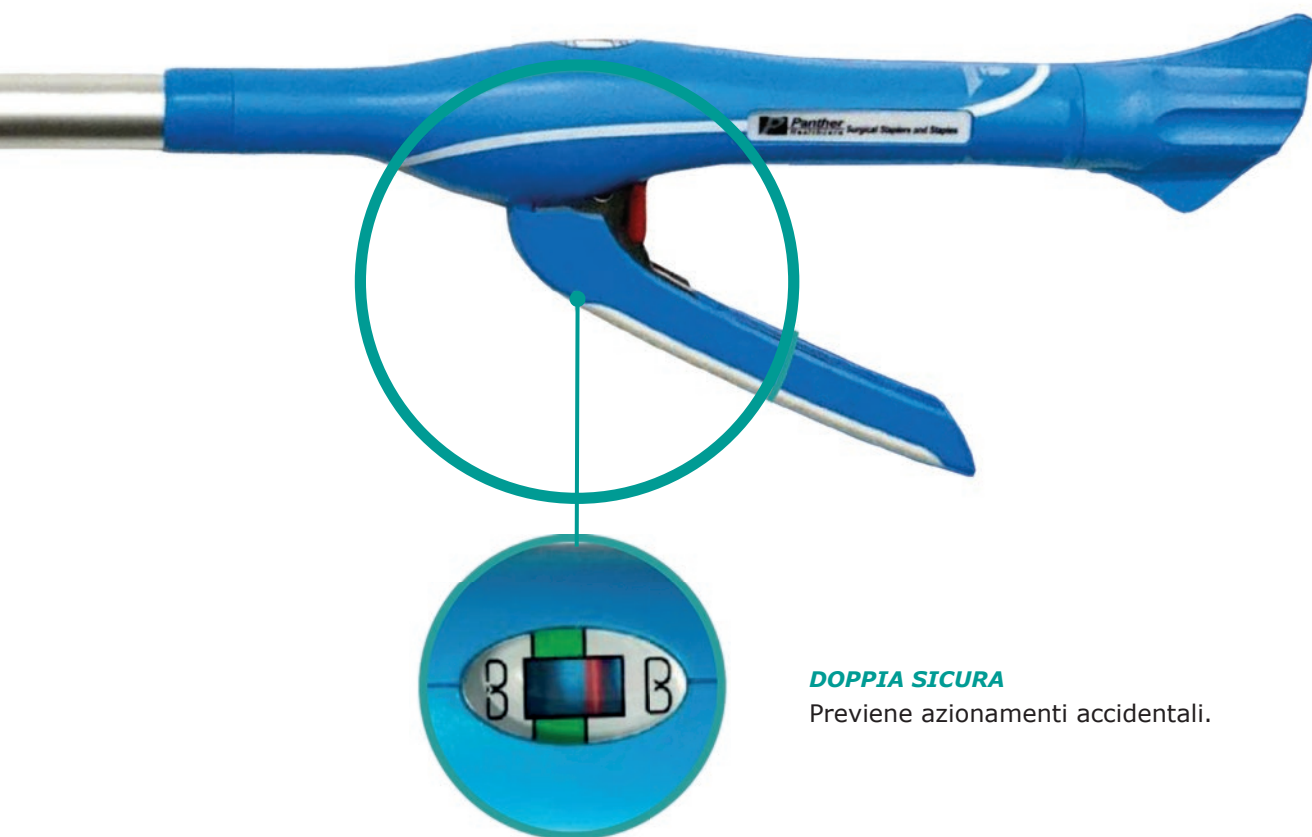

#### **DOPPIA SICURA**

Previene azionamenti accidentali.

## Suturatrici circolari per anopessi ad alto volume


Studiate per il trattamento dell'anopessi, permettono di soddisfare tutte le esigenze grazie all'ampia gamma di diametri e alla cartuccia dal volume maggiorato



*Cartuccia trasparente che garantisce la massima visibilità della mucosa rettale*



*2 grandi finestre per il passaggio dei fili di sutura che facilitano il posizionamento del prolasso nella cartuccia*

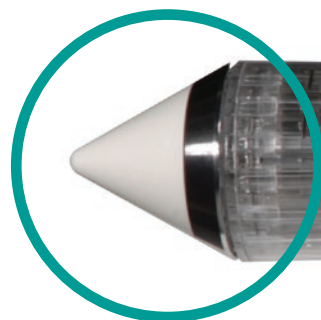

*Marcatori di distanza tra anastomosi e margine anale*

*Cartuccia ad alto volume. Il 20% di capienza in più rispetto al modello classico*

**Altezza del punto aperto (3,8 mm).  
Numero di graffette (32 o 34 a seconda del diametro) che garantisce ottima emostasi.**



Otturatore




Anoscopio  
finestrato



Tensionatore dei  
fili di sutura



Dilatatore anale a farfalla  
e circolare, CAD

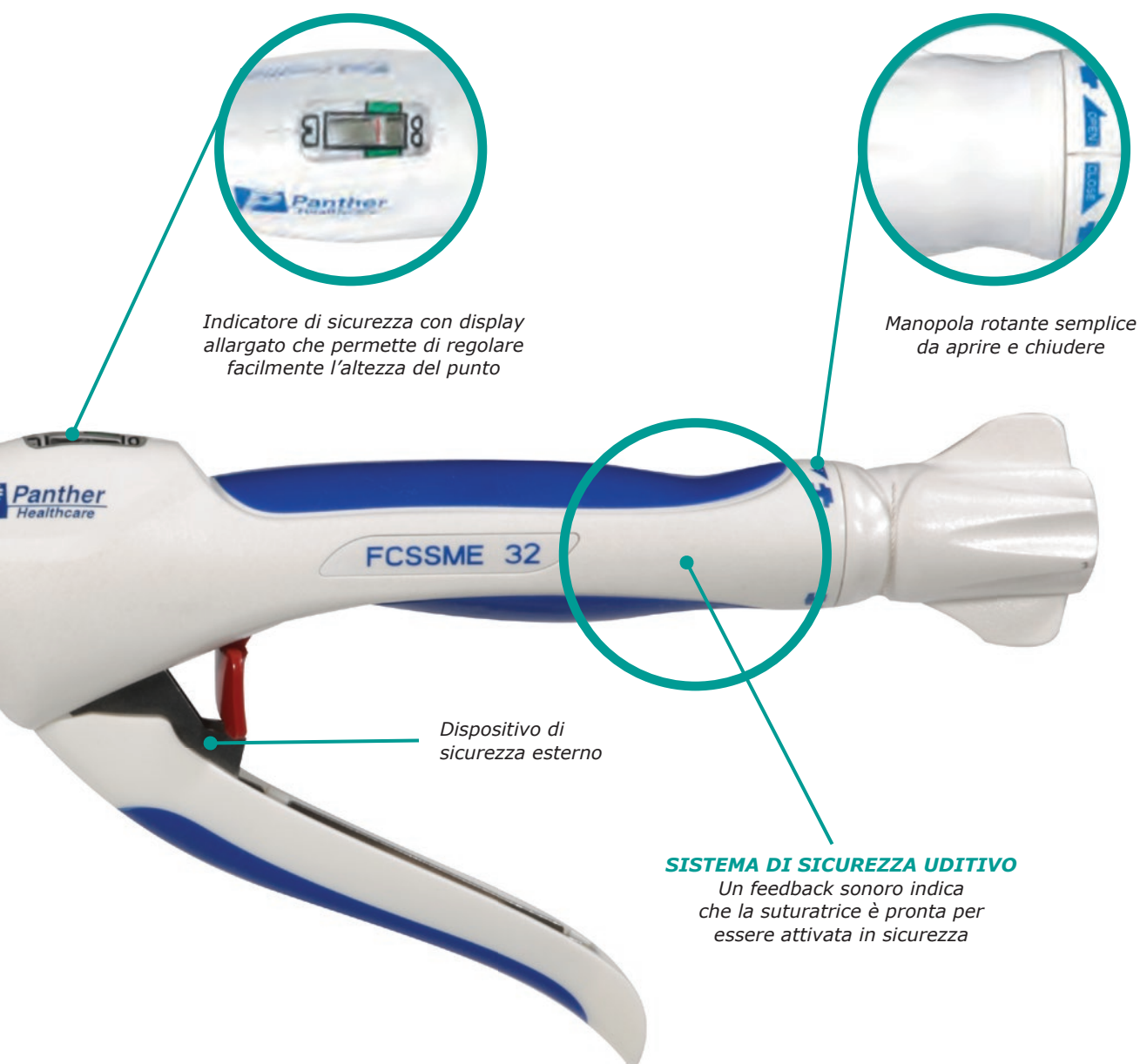

DIAMETRO (mm)	H. PUNTI APERTI (mm)	H. PUNTI CHIUSI (mm)
32,34	3.8	0.75 - 1.5

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ ml (Volume cc)	CONF.
<b>FCSSME32</b>	Suturatrice PANTHER® monouso per emorroidi, Ø 32 mm, con cartuccia trasparente, feedback uditivo, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura	23,04	1 pz.
<b>FCSSME34</b>	Suturatrice PANTHER® monouso per emorroidi, Ø 34 mm, con cartuccia trasparente, feedback uditivo, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura	27,15	1 pz.

## Suturatrici circolari per anopessi standard

Studiate per il trattamento dell'anopessi, permettono di soddisfare tutte le esigenze grazie all'ampia gamma di diametri



- Procedura di anopessi: la **cartuccia trasparente** garantisce la massima visibilità della mucosa rettale.
- Ampia gamma di diametri (32, 33, 34 mm) per soddisfare tutte le esigenze.
- Comodità nel passaggio dei fili di sutura: 4 finestre poste a 90° alla base della cartuccia.
- Regolazione della chiusura del punto in titanio nell'intervallo compreso tra 0,75 e 1,5 mm. L'altezza del punto aperto di 3.8 mm è studiata per assicurare un'ottima emostasi e al contempo permettere la chiusura tramite una forma a "B" perfetta.
- Elevato numero di punti (da 32 a 34), a seconda del diametro della suturatrice, distribuiti su due linee concentriche sfalsate, per garantire una perfetta emostasi.

DIAMETRO (mm)	H. PUNTI APERTI (mm)	H. PUNTI CHIUSI (mm)
32, 33, 34	3.8	0.75 - 1.5

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
FCSSWAE32	Suturatrice PANTHER® monouso per emorroidi, diam. 32 mm, con cartuccia trasparente, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura	1 pz.
FCSSWAE33	Suturatrice PANTHER® monouso per emorroidi, diam. 33 mm, con cartuccia trasparente, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura	1 pz.
FCSSWAE34	Suturatrice PANTHER® monouso per emorroidi, diam. 34 mm, con cartuccia trasparente, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura	1 pz.





**Il kit sterile monouso comprende:**

- Suturatrice (da 32, 33 o 34 mm)
- Dilatatore anale circolare CAD
- Anoscopio fenestrato
- Otturatore
- Tensionatore dei fili di sutura.




**Doppio meccanismo di sicurezza**


**(esterno ed interno)** per prevenire azionamenti accidentali. Per ottenere una perfetta chiusura dei punti è necessario posizionare l'indicatore rosso al centro della banda verde.

## Clips Emostatiche PANTHERLOK®

Clips emostatiche in Polimero NON riassorbibile con blocco di sicurezza per la legatura e chiusura dei vasi in chirurgia open e laparoscopica e relativi applicatori ed estrattori

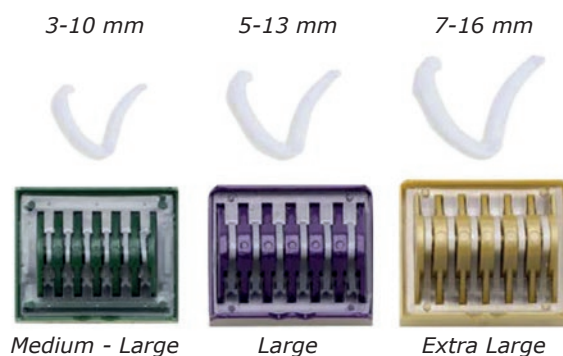

1. I denti sono progettati per mantenere la clip all'interno dei morsi dell'applicatore.
2. La zigrinatura interna garantisce un miglior grip sul vaso al fine di prevenire lo slittamento della clip.
3. La risposta tattile e acustica conferma l'avvenuta chiusura della clip PANTHERLOK®.
4. La forma ad arco permette la rimozione con strumenti adeguati (Estrattori adeguati).
5. La cerniera consente la flessibilità nel posizionamento della clip prima della chiusura completa della clip stessa.
6. La clip è costituita da un Polimero non assorbibile con proprietà antimicrobiche, inerte, atossico, non conduttivo, radiotrasparente e non interferisce con TAC, risonanza magnetica, o raggi X.

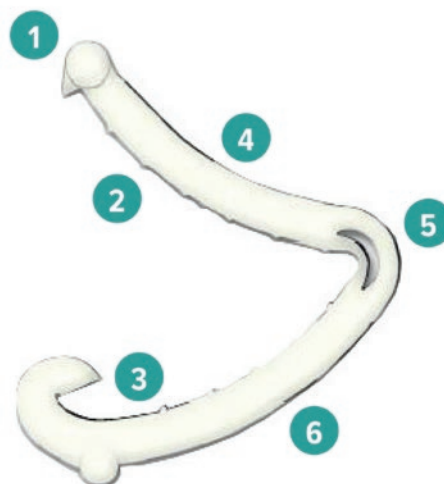

CODICE	MISURA CLIPS	LEGATURA DI VASI E TESSUTI (mm)	DIAMETRO DEI VASI (mm)	LUNGH. CLIP (mm)	NUMERO DI CLIPS/ CARTUCCIA	COLORE	CARTUCCE CONF.	CLIPS CONF.
PLCB101	XL	7-16	3-10	17	6	ORO	14 pz.	84 pz.
PLCB102	L	5-13	2-7	13	6	VIOLA	14 pz.	84 pz.
PLCB103	ML	3-10	1-3	9,5	6	VERDE	14 pz.	84 pz.




\* Il codice colore della cartuccia corrisponde a quello dell'applicatore. Ciascuna cartuccia contiene 6 Clip.

## Applicatori PANTHERLOK®



Gli Applicatori laparoscopici PANTHERLOK® sono disponibili nella misura ML, L e XL, e sono provvisti di codice colore (manopola di rotazione colorata) corrispondente al colore delle rispettive cartucce.

Gli applicatori laparoscopici PANTHERLOK® hanno una manopola di rotazione a 360° per facilitare l'accesso e migliorare la visibilità. Sono dotati di attacco Luer Lock al fine di facilitare la pulizia del canale di lavaggio ed eliminare il rischio di contaminazione.

APPLICATORI ED ESTRATTORI LAPAROSCOPICI PANTHERLOK®						
CODICE	MISURA CLIPS	DIAMETRO (mm)	DIAMETRO TROCAR (mm)	LUNGHEZZA OPERATIVA (cm)	COLORE	CONFEZIONAMENTO
PCAEB2011	XL	10	10-12	33	ORO 	singolo
PCAEB2012	L	10	10	33	VIOLA 	singolo
PCAEB2013	ML	5	5	33	VERDE 	singolo
PCAREB20110	ML/L	5	5	33	-	singolo
PCAREB20111	L/XL	10	10-12	33	-	singolo

APPLICATORI PER CHIRURGIA APERTA PANTHERLOK®						
CODICE	MISURA CLIPS	DIMENSIONE CLIP	ANGOLAZIONE (°)	LUNGHEZZA OPERATIVA (cm)	COLORE	CONFEZIONAMENTO
PCA0B2014	XL	L & XL	70	27	ORO 	singolo
PCA0B2015	L	L & XL	70	27	VIOLA 	singolo
PCA0B2016	ML	ML & L	70	27	VERDE 	singolo
PCA0B2017	XL	L & XL	9	27	ORO 	singolo
PCA0B2018	L	L & XL	9	27	VIOLA 	singolo
PCA0B2019	ML	ML & L	9	27	VERDE 	singolo



AddLife è una società svedese che opera in Europa e detiene la proprietà di aziende leader di mercato che offrono soluzioni e prodotti principalmente per il settore "healthcare". La società è quotata dal 2016 al Nasdaq Stockholm, Large Cap. Le società del gruppo AddLife offrono prodotti e servizi di elevata qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio.

La gamma offerta consiste in prodotti di vari fabbricanti distribuiti nei diversi mercati ma anche da prodotti proprietari. La gamma di servizi offerti dalle aziende del Gruppo include servizi di consulenza, supporto tecnico e formazione.

Con questo approccio AddLife crea valore aggiunto per i clienti in tutta Europa e genera una crescita a lungo termine per il Gruppo.

AddLife ha due aree di business denominate "Labtech" e "Medtech" ed è attualmente presente in oltre 25 paesi.



#### VISIONE

Miglioriamo la vita delle persone operando da leader e creando valore nel settore del Life Science.



#### MISSION

AddLife fornisce valore aggiunto ai propri clienti nel settore dell'healthcare, dalla ricerca all'assistenza medica. AddLife offre soluzioni, servizi e prodotti, di alta qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio sia nel settore privato che in quello pubblico in Europa.




#### VALORI

Semplicità - Responsabilità - Impegno - Innovatività. Il successo di AddLife si basa su una cultura aziendale ben supportata in tutto il Gruppo. I valori sono i principi guida nella vita quotidiana di tutti i dipendenti, indipendentemente dal paese in cui operano.

#### I NOSTRI PIÙ SIGNIFICATIVI VANTAGGI COMPETITIVI

AddLife possiede e sviluppa aziende che migliorano la qualità della vita, riducono la sofferenza dei pazienti e producono benefici sociali. Per realizzare questa visione, offriamo alle aziende del nostro Gruppo soluzioni competitive che soddisfano le esigenze dei clienti sia a breve che a lungo termine.

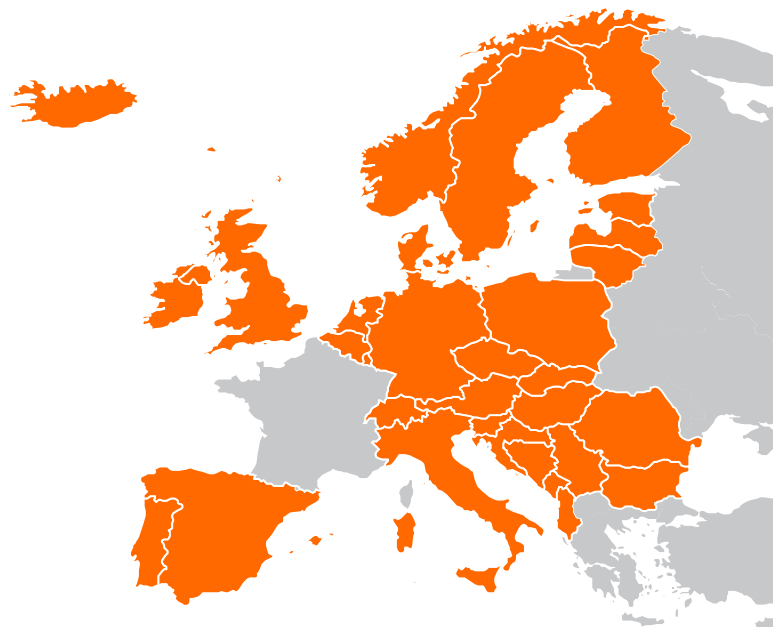

Distribuito da:

Biomedica Italia S.r.l.  
Società unipersonale - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Addlife Development AB  
Via Thomas Alva Edison, 6 - 20057 Assago (MI) Italia  
Tel. +39 02 4954 0340 - Fax +39 02 4954 0350  
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - P.IVA e C.F. IT11408800966  
Reg. Imp. Milano - R.E.A. Milano 2600265  
EUDAMED SRN : IT-IM-000030791  
info@biomedica-italia.it - biomedica\_italia@pec.it - www.biomedica-italia.it

Il marchio Biomedica è presente in 12 paesi:  
Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia.

© 2024 Biomedica Italia S.r.l. Diritti riservati

Biomedica Italia S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento qualsiasi modifica ai prodotti/servizi qui previsti.