



SurgiTractor

SurgiTractor è progettato per ottenere la massima apertura con una incisione minima, mantenendo un'adeguata umidità e proteggendo la ferita dalla contaminazione.


DETTAGLI TECNICI

- **Massima apertura con minima incisione**

Grazie alla struttura dell'anello superiore di SurgiTractor, è possibile mantenere una forma circolare perfetta quando viene posizionato sul sito operatorio.

- **Facile da piegare**

Grazie alla molla centrale all'interno del tubo superiore, l'operatore può facilmente ripiegare la pellicola elastica sopra il tubo superiore durante la fase di retrazione.

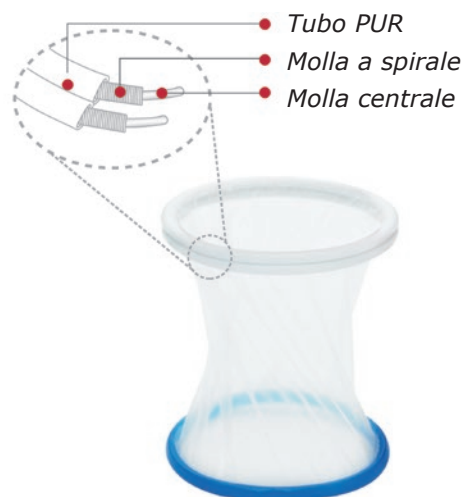

SURGI TRACTOR

■ Retrattore/Protettore delle ferite ■ Innovativo ■ Avanzato



Port da 12 mm sul coperchio

Permette l'introduzione di strumenti con diametro da 5 mm a 12 mm senza perdite di gas.

Gas port a doppia via

Per iniettare o evacuare il gas di insufflazione dall'area peritoneale.

Coperchio in silicone trasparente

L'operatore può avere una visione chiara dell'area di apertura attraverso il coperchio, facilitando l'inserimento sicuro dello strumento nell'area peritoneale.

Coperchio facile da attaccare e staccare dal retrattore/protettore

L'operatore può attaccare e staccare il coperchio in pochi secondi con estrema facilità.

INDICAZIONE PER L'ORDINE

CODICE	MISURA	DESCRIZIONE (Dimensione incisione consigliata)	NUM. PEZZI PER CONFEZIONE
ST0103	XX-Small	Anello di protezione/retrazione della ferita - Monouso - per incisioni 1-3 cm	10
ST0204	X-Small	Anello di protezione/retrazione della ferita - Monouso - per incisioni 2-4 cm	10
ST0306	Small	Anello di protezione/retrazione della ferita - Monouso - per incisioni 3-6 cm	10
ST0509	Medium	Anello di protezione/retrazione della ferita - Monouso - per incisioni 5-9 cm	8
ST0914	Large	Anello di protezione/retrazione della ferita - Monouso - per incisioni 9-14 cm	8
ST1117	X-Large	Anello di protezione/retrazione della ferita - Monouso - per incisioni 11-17 cm	5
ST1725	XX-Large	Anello di protezione/retrazione della ferita - Monouso - per incisioni 17-25 cm	6
STC0306	Small	"Cover" monousoper accesso strumentario laparoscopico fino a 12 mm, da utilizzare con codice ST306	6



Distribuito da:

Biomedica Italia S.r.l.
Società unipersonale - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AddLife Development AB
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 4954 0340 - Fax +39 02 4954 0350
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - P.IVA e C.F. IT11408800966
Reg. Imp. Milano - R.E.A. Milano 2600265
EUDAMED SRN : IT-IM-000030791
info@biomedica-italia.it - biomedica_italia@pec.it - www.biomedica-italia.it

Il marchio Biomedica è presente in 12 paesi:
Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia.

© 2026 Biomedica Italia S.r.l. Diritti riservati

Biomedica Italia S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento qualsiasi modifica ai prodotti/servizi qui previsti.

AddLife è una società svedese che opera in Europa e detiene la proprietà di aziende leader di mercato che offrono soluzioni e prodotti principalmente per il settore "healthcare".

La società è quotata dal 2016 al Nasdaq Stockholm, Large Cap. Le società del gruppo AddLife offrono prodotti e servizi di elevata qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio.

La gamma offerta consiste in prodotti di vari fabbricanti distribuiti nei diversi mercati ma anche da prodotti proprietari. La gamma di servizi offerti dalle aziende del Gruppo include servizi di consulenza, supporto tecnico e formazione.

Con questo approccio AddLife crea valore aggiunto per i clienti in tutta Europa e genera una crescita a lungo termine per il Gruppo.

AddLife ha due aree di business denominate "Labtech" e "Medtech" ed è attualmente presente in oltre 25 paesi.